

# OPERA

## 1927nm Kesirli Thulium Lazer




 ENPA<sup>®</sup>

# PRENSİP

## BV Laser Thulium Lazer'in 1927nm'si

dalga boyu daha derin bir seviyeye nüfuz eder epiderminin alt kısmında ve

Üst tabakanın soyulmasına neden olmadan dermis tabakasını yeniler. Cilt pigmentasyonunun büyük kısmı bu hassas tabakada bulunur. Pigmentler daha sonra küçük parçalara ayrılır ve bağışıklık hücreleri tarafından emilir, hasarlı cildi yeniler ve kolajen üretimini uyarır. Bu, melazma, çiller, güneş lekeleri ve yaşlılık lekelerini etkili bir şekilde hedef alır ve tedavi eder.

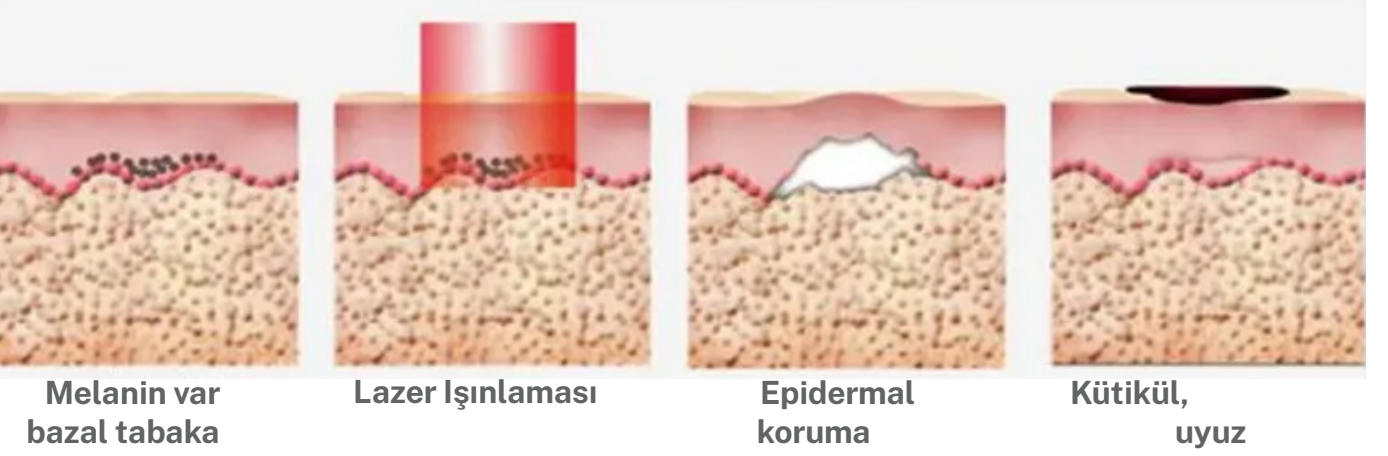

# KULLANICI



✓Akıllı

✓Uygun

✓Şık

✓Dost canlısı

## ARAYÜZÜ

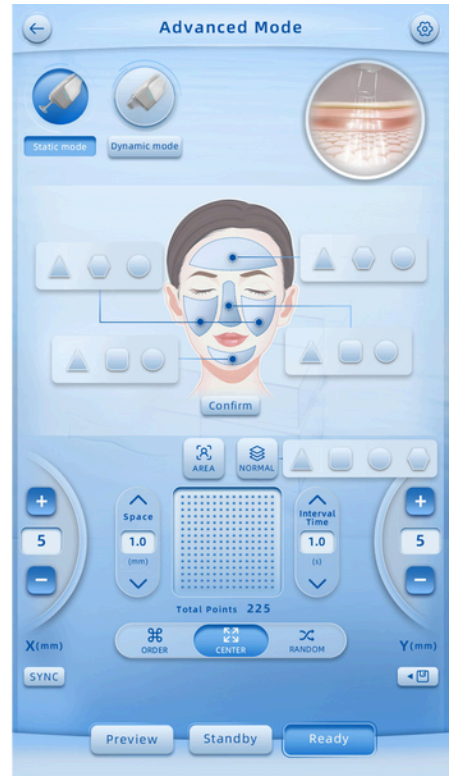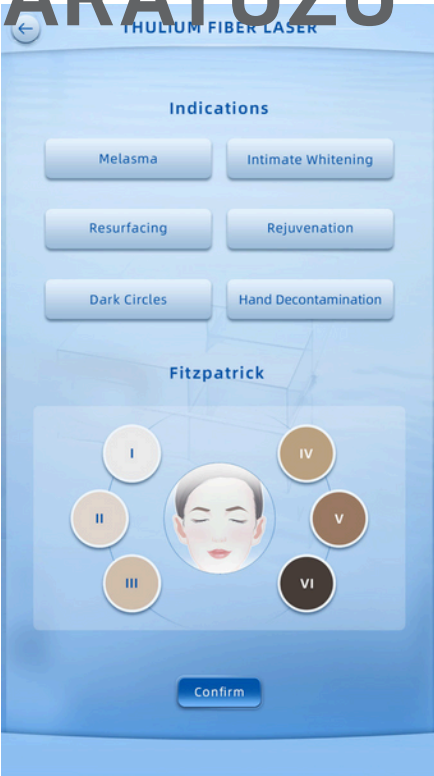

# TEKNİK PARAMETRELER

## ARKTİK SERİSİ

## TULYUM LAZER

Dalga Boyu	1927nm
Lazer Gücü	15w
Nokta Boyutu	0~200um
Darbe Geniğiği	0,1us-5ms
Tarama Boyutu	1*1mm-20*20mm
Nokta Mesafesi	0,1 mm-2 mm
Tarama Modu	Sıra, Merkez veya Rastgele



## BAŞVURU

1. Kırışıklıkları iyileştirir: Kuru çizgiler, ince çizgiler, çatlaklar, cilt gevşekliği.
2. Kolajen yenilenmesini uyarır ve yaşlanmayı geciktirir.
3. Cildi aydınlatır; Düzensiz cilt tonu.
4. Yara izlerini azaltır: Akne izleri ve ameliyat izleri vb.
5. Pigmentasyonu giderir: Çiller, kloazma, melazma, çiçek bozuğu, yaşlılık lekeleri, güneş lekeleri.
6. Genişlemiş gözenekleri ve pürüzlü cildi iyileştirir.
7. Cilt bakım ürünlerini tanıtın.
8. Seboreik alopesi vb. iyileştirir.



TULYUM LAZER




# 1927nm Kesirli

## TULYUM LAZER







- Çift ablatif ve ablatif olmayan etki, daha güvenli ve daha kısa iyileşme süresi.
- Daha az emilim su ve daha derin nüfuz.

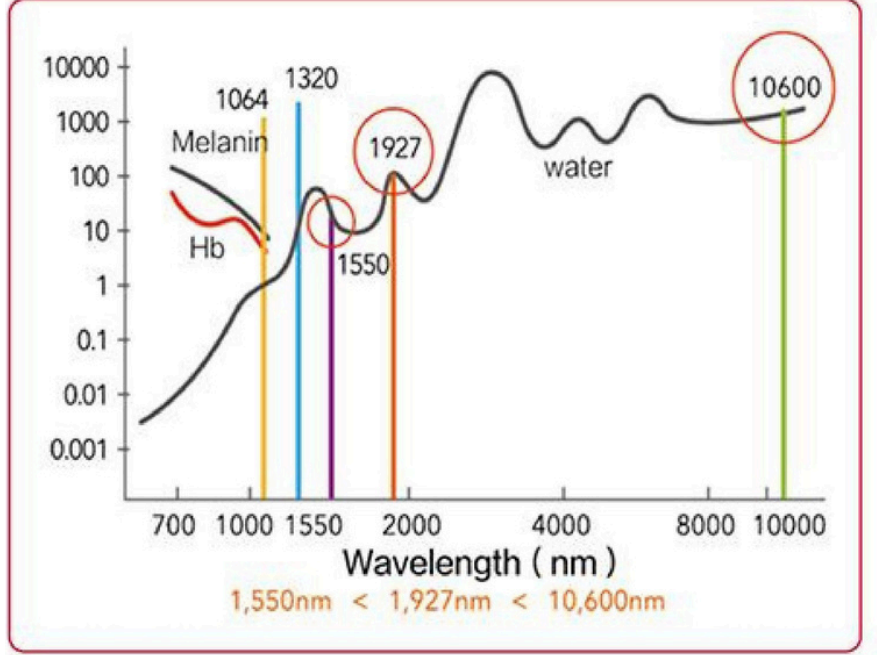

- Daha iyi tedavi sonucu:  
Nüfuz derinliği ve enerjisi epidermin alt kısmı ile dermin üst kısmı arasında yoğunlaşmıştır.

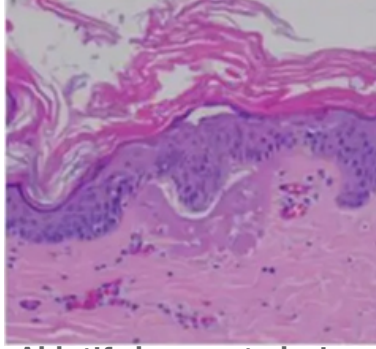

Ablatif olmayan tedavi


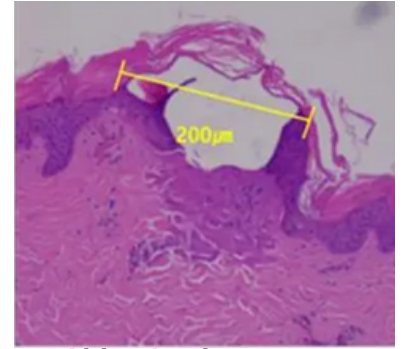


Ablatif tedavi

- Sırf malzemesi olmaması ve uzun ömürlü olması nedeniyle düşük bakım maliyeti Tulium lifi.
- 0,1µs-5ms darbe genişliği daha az ağrıya neden olur, bu da anestezi olmadığı anlamına gelir ve daha az kesinti.
- Akıllı kullanıcı dostu arayüz, kullanıcıların daha istikrarlı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar daha doğru tedaviler.
- 2 adet plug-in tedavi başlığı (fraksiyonel başlık + başlık) ile donatılmıştır (silindirler), daha kullanışlı, daha kapsamlı, daha verimli.



# ETKİ KARŞILAŞTIRMASI

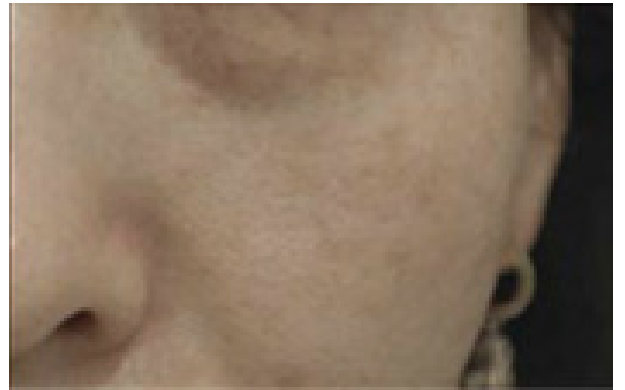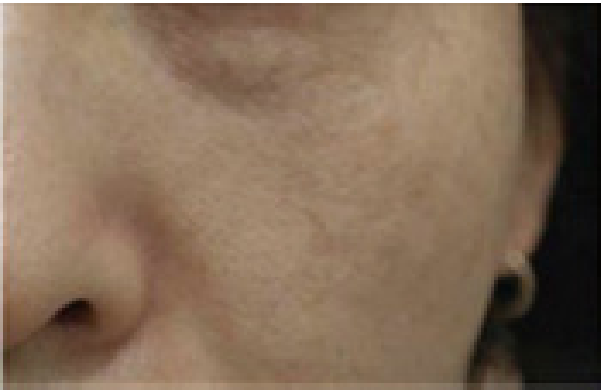



Yenilikçi

Güvenilir

Verimli

Harika